


FleXNeedle®

**Uniwersalna
igła do biopsji
18g**



Igła **FlexNeedle** została stworzona do biopsji w trudno dostępnych lokalizacjach w obwodowych segmentach płuc

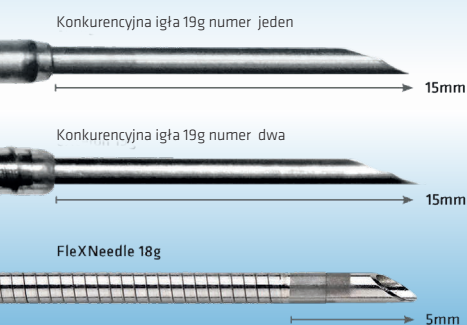

Większa elastyczność

- krótsza o około 70% sztywna część końcówki igły zapewnia większą elastyczność i dostęp do krętej anatomii dróg oddechowych

Lepsza kontrola

- ergonomiczna, obsługa igły jedną ręką
- standardowe złącze Luer-lock: kompatybilne z szeroką gamą strzykawek aspiracyjnych i kraników
- precyzyjna i kontrolowana głębokość wkucia od 5 do 20 mm za pomocą ogranicznika

Optymalna biopsja

- opatentowana końcówka tnąca igły umożliwia pobieranie próbek histologicznych i cytologicznych
- pobieranie dużych próbek jest możliwe dzięki wewnętrznemu prześwitowi igły 0,95 mm

Informacje dotyczące zamawiania

Numer katalogowy	Średnica igły Gauge	Głębokość penetracji (mm)	Maksymalna średnica zew. (mm)	Całkowita długość narzędzia (mm)
10005-2	18	0-20	1.9	1400

**With Access
Comes Possibility™**

Broncus Medical, Inc.

sales@broncus.com
www.broncus.com

KONKI Med (dystrybucja w Polsce)

info@konkimed.pl
+48 662 774 334, +48 22 378 12 78



Rx only. Wyłącznie do użytku przez pracowników służby zdrowia. Należy zapoznać się z oznakowaniem produktu, aby uzyskać informacje na temat wskazań, instrukcji użytkowania, przeciwwskazań, możliwych powikłań, ostrzeżeń i środków ostrożności. © 2019 Broncus Medical, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten produkt jest objęty jednym lub większą liczbą następujących patentów: patent USA nr 8,517,955. Patenty w toku. BRONCUS, logo BRONCUS i FlexNeedle są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Broncus Medical, Inc.

MK-321PL Rev. 07/23