


UNIKATOWA TECHNOLOGIA NAWIGACYJNA STWORZONA DLA
WIELU TECHNIK BRONCHOSKOPOWYCH



BTPNA (Bronchoscopic TransParenchymal Nodule Access - Bronchoskopowy dostęp przezmiąższowy do guzków)

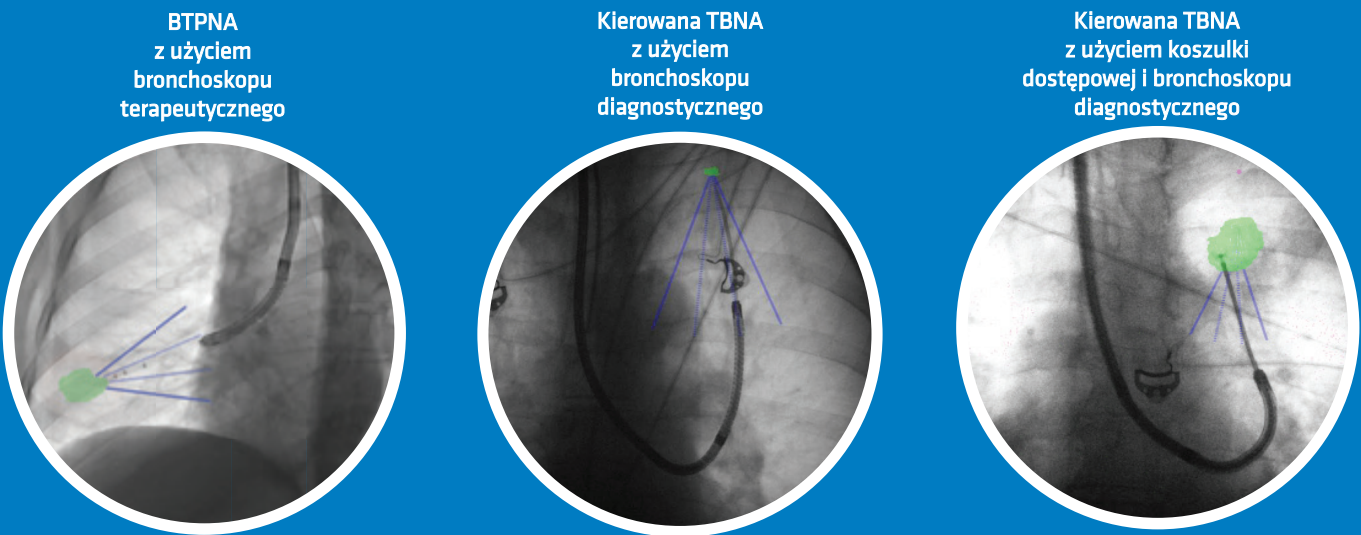

	BTPNA	Kierowane TBNA
Zalecane dla	Guzków "non bronchus sign"	Guzków położonych obwodowo
Wymagany endoskop	Terapeutyczny	Cienki lub ultracienki
Materiały jednorazowe	Archimedes Access Kit	Niewymagane dla nawigacji przez drzewo oskrzelowe Niedrogie klucze "Fluoro Key" w przypadku fuzji
Korzyści	Dostęp do guzków "non bronchus sign"	Bez-kosztowa lub nisko-kosztowa nawigacja Możliwość użycia narzędzi i bronchoskopów różnych producentów

Broncus Medical, Inc.

Kontakt: sales@broncus.com
www.broncus.com

KONKI Med (dystrybucja w Polsce)

Kontakt: info@konkimed.pl
tel. +48662774334



Rx only. Wyłącznie do użytku przez pracowników służby zdrowia. Informacje na temat wskazań, instrukcji obsługi, przeciwwskazań, ostrzeżeń i przestróg znajdują się na etykiecie produktu. Prawa autorskie © 2019, Broncus Medical Inc., Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten produkt jest objęty jednym lub większą liczbą następujących patentów: patenty USA nr 7 756 563; 7 889 905; 8 064 669; 8 468 003; 9 037 215; 9 2 65 4 68; i 9 886 760. Patenty w toku. BRONCUS, logo BRONCUS i ARCHIMEDES są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Broncus Medical, Inc.

MK-348 Rev 07/23 PL



Wirtualna nawigacja
bronchoskopowa
z fuzją fluoroskopową

Jak dotrzeć do guzków
nienaciekających oskrzele
(non bronchus sign)?




KOMPLEKSOWE PLANOWANIE ZABIEGU




- Identyfikacja naczyń umożliwia zaplanowanie drogi omijającej naczynia podczas BTPNA oraz TBNA



- Możliwość zdefiniowania do ośmiu (8) celów w wybranym widoku TK

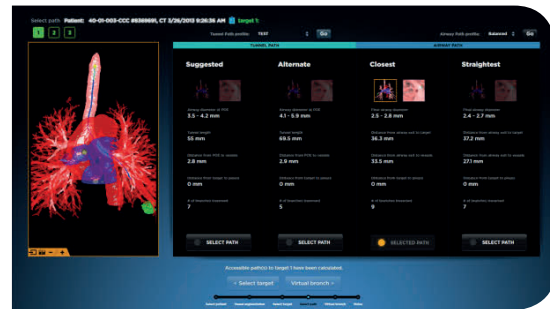

- Oprogramowanie oblicza wiele dróg dojścia do celów dla BTPNA i TBNA

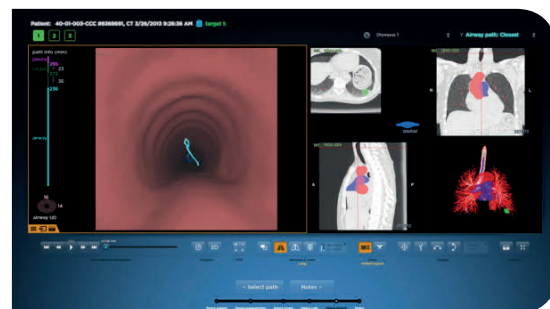

- Wirtualna bronchoskopia umożliwia przegląd wybranej drogi do celu



Oprogramowanie do planowania i wirtualnej bronchoskopii dostępne również na laptopie


Archimedes® łącząc obrazowanie TK z fuzją fluoroskopową i oprogramowaniem do rozpoznawania wzorców, umożliwia wyświetlanie w czasie rzeczywistym trójwymiarowego obrazu dróg oddechowych oraz dostęp przezmiąższowy do guzków w płucach.




Wizualizacja
bronchoskopowa
oraz wirtualna

Wizualizacja
fluoroskopowa

INTUICYJNA NAWIGACJA I PROWADZENIE DO CELU

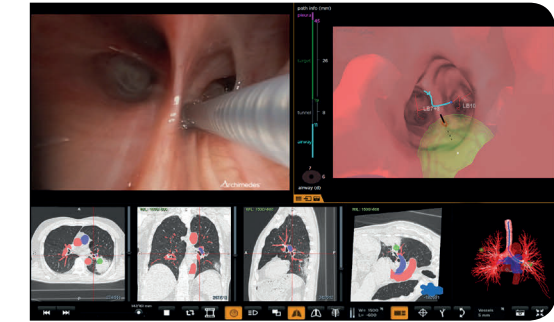


- Bronchoskopowa i wirtualna wizualizacja w czasie rzeczywistym
- Nakładanie celu i naczyń na podstawie TK
- Rekonstrukcja 3D drzewa dróg oddechowych i układu naczyniowego

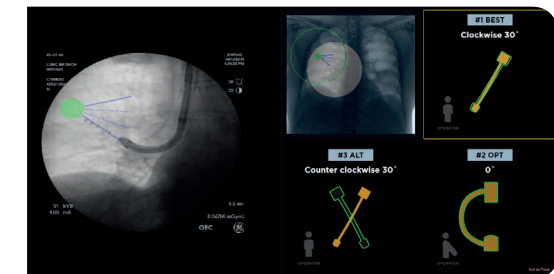


- Zalecane ustawienia ramienia C
- Cel nakładany za pomocą fuzji fluoroskopowej
- Nawigacja do celu z dokładnością do 3 mm


WIDOK AP

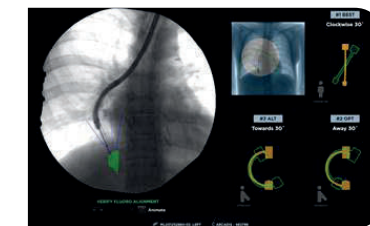

AWAY 30° VIEW

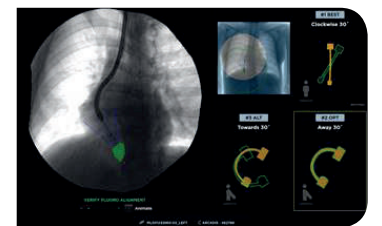

TOWARDS 30° VIEW

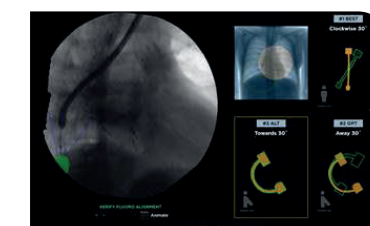

- Nałożenie celu za pomocą fuzji fluoroskopowej, dla wielu pozycji ramienia C, zapewnia trójwymiarową wizualizację anatomii, pozycjonowanie celu i endoskopu

With Access Comes Possibility™