

KARTA TECHNICZNA

Soluscope Serie 5

Soluscope Serie 5 to myjnia-dezynfektor do endoskopów elastycznych. *Soluscope Serie 5* jest oznaczony znakiem CE i spełnia zasadnicze wymagania rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych 2017/745.

Charakterystyka produktu

- **Wymiary misy:** 53 cm x 38 cm - owalna, odpowiednia do dłuższych endoskopów, z uwzględnieniem promienia gięcia endoskopu
- **Waga:** 160 kg (pusta) - 190 kg (pełna)
- **Materiał powłoki zewnętrznej:** surowe i malowane metale, kydex®, krion®
- **Proces bezdotykowy:** Czytniki RFID, automatyczna pokrywa i pedał nożny
- **Interfejs użytkownika:** 7-calowy kolorowy ekran dotykowy, w pełni piktogramowy interfejs, migające diody LED zapewniające natychmiastową wizualizację statusu
- **Identyfikowalność:** Czytniki i tagi RFID, drukarka, skaner kodów kreskowych i naklejki
- **Elektroniczna identyfikowalność:** EP-Digital, połączenie z oprogramowaniem innych firm na żądanie
- **Bezpieczne obchodzenie się z chemikaliami:** zabezpieczone kanistry (zamek i klucz, zintegrowane kanistry), działa bez wyciągu oparów lub specjalnej wentylacji pomieszczenia

Opis procesu

- Wydajność: 1 endoskop na cykl, przetwarzanie przez półzanurzenie
- Zatwierdzony zgodnie z ISO 15883-1&4 z Soluscope ECL-Enzymatic Cleaner i Soluscope PAA
- Czas cyklu: 17 minut (mierzone w rzeczywistych warunkach użytkowania za pomocą gastroskopu)
- Sprawdzona kompatybilność z materiałami endoskopowymi
- Złącza dostępne dla każdej wiodącej marki endoskopów na rynku.
- Do 6 kanałów kontrolowanych indywidualnie
- Ciągły test szczelności



Cykl rutynowy

Pojedyncze czyszczenie + pojedyncza dezynfekcja



Cykl rutynowy

Podwójne czyszczenie + pojedyncza dezynfekcja



Cykl sterylizacji płynnej

Czyszczenie i dezynfekcja zatwierdzone zgodnie z ISO 14937 part 5.3.1




Cykl poranny

Pojedyncza dezynfekcja

Po sprzedaży

- **Konserwacja:** co 2 lata lub 4000 cykli (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) przez technika Soluscope.
- **Kwalifikacja wydajności:** coroczna rekwalifikacja zgodnie z normą EN ISO 15883 (w zakresie odpowiedzialności klientów)
- **Rozwiązywanie problemów:** zdalne sterowanie, automatyczna kopia zapasowa
- **Gwarancja:** 2 lata - urządzenie, 6 miesięcy - części zamienne

Wymiary produktu

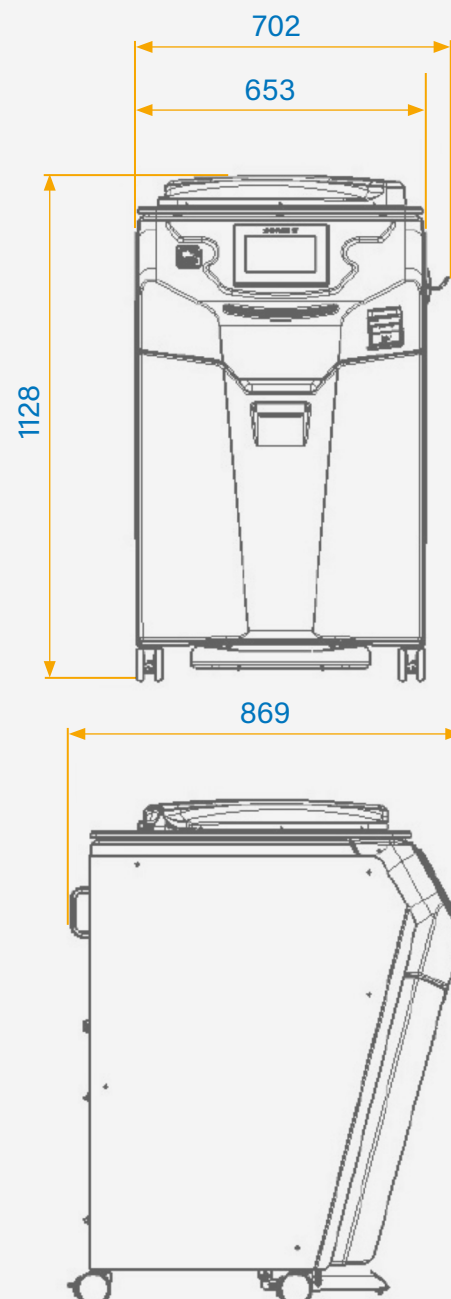

KARTA TECHNICZNA

Soluscope Serie 5

Wymagania przed montażem

Aby uzyskać pełną specyfikację instalacji Soluscope Serie 5, należy skontaktować się z dostawcą Soluscope.

Opis	Wymóg
Zasilanie	1 x 220 - 240 V / 50 Hz z wyłącznikiem różnicowoprądowym 30 mA
Filtracja wody	Wbudowany filtr końcowy 0,2 µm
Zaopatrzenie w wodę	W większości przypadków nie jest wymagana zewnętrzna filtracja, osmozer ani zmiękczacze (w zależności od jakości wody), myjnia nie jest kompatybilna z wodą po odwróconej osmozie
Odlączenie sieci wodociągowej	Zgodność z normą EN 1717, brak konieczności stosowania rozłącznika BA
Ciśnienie wody	0,4 - 4 bary z reduktorem ciśnienia
Natężenie przepływu wody	4 L/min min.
Szczelna pokrywa	Nie jest wymagany wyciąg oparów
Filtracja powietrza	Wbudowany kompresor z filtrem HEPA 13 0,2 µm - Nie wymaga zewnętrznego wlotu powietrza
Zużycie energii	0,09 kWh/cykl (woda mieszana, cykl 1)
Zużycie wody	32 L/cykl (cykl 1)



Dostępna dokumentacja

Następujące dokumenty są dostępne na żądanie od Soluscope:

- Deklaracja zgodności
- Karty charakterystyki
- Formularz przedinstalacyjny
- Dokumentacja naukowa



Informacje dotyczące zamawiania produktów

Opis	Ilość	Kod zamówienia
Soluscope Serie 5	1	SL-V5
Soluscope ECL-Enzymatic Cleaner	2 x 5 L	
Soluscope PAA	2 x 5 L	
Identyfikatory RFID dla użytkowników	10 w opakowaniu instalacyjnym / dodatkowe do zamówienia na sztukę	RFID-IDENTYFIKATOR UŻYTKOWNIKA
Naklejki RFID na endoskopy	Rolka 30 naklejek - 1 rolka w zestawie instalacyjnym	RFID-TAG-ENDO
Kwartalny zestaw filtracyjny (woda/powietrze)	Co 3 miesiące lub 1000 cykli	A5333
Papier termiczny	4 rolki w zestawie instalacyjnym	IMP3005
Złącza	W zależności od stanu magazynowego endoskopu	
Złącza, o'ringi i uszczelki	Wymieniać co 3 miesiące lub co 1000 cykli	